

NAUSICAA Médical

NAUSICAA Médical est une marque d'AKS FRANCE S.A.

ACCESSOIRE DE LÈVE-PERSONNE MOBILE : SYSTÈME DE PESÉE PESON RS (HOMOLOGUÉ)

Cet instrument convient aux usages réglementés
conformément au décret 91.330 du 27 Mars 1991.



PRÉCISION : 100 g

CAPACITÉ MAXIMALE : 300 kg

Dispositif médical Im selon la directive 93/42/CEE

PESON RS

Fabricant :
CHARDER ELECTRONIC CO.Ltd
n°130 Guozhang Rd
Dali Dist - Taichung City 412
TAIWAN

Guide de Montage / Releveur Mobile : PESON RS
Fabriqué par AKS FRANCE S.A. / Approuvé par Ghizlane Labrosse (Ingénieur Biomedical)

Sommaire

Guide de Montage / Système de Pesée : PESON RS

• Instructions de Montage	2-3
• Mise en Service	4
• Consignes Générales de Sécurité	5
• Garantie	5

Instructions de Montage

METTRE LES 6 PILES (FOURNIES) EN PLACE AVANT LE MONTAGE :

- Le PESON RS est livré avec les attaches correspondantes aux lève-personnes.
 - Ces attaches permettent une charge maxi de 350 kg.
 - Obligation de faire vérifier une fois par an ces attaches, lors de la vérification périodique annuelle (obligatoire pour un instrument en métrologie légale). En cas de non respect de ce contrôle, la garantie ne pourra pas s'appliquer.
 - Le PESON RS est un instrument en métrologie légale, classe III.
 - Cet instrument approuvé est livré avec sa vignette et son carnet de métrologie. A la date indiquée sur cette vignette, l'utilisateur final devra faire intervenir un technicien agréé pour la vérification périodique.
 - Cet instrument convient aux usages réglementés conformément au décret 91.330 du 27 Mars 1991.
- Contrat de vérification à votre disposition.

Étape 1 :

- Le logement se trouve au dos.

1



Étape 2 :

- Retirer le couvercle de l'appareil.

2



Étape 3 :

- Retirer le logement.

3



Étape 4 :

- Installer les piles : 6 piles AAA.

4



Instructions de Montage

Étape 5 :

- Installer de nouveau le logement.

5



Étape 6 :

- Installer de nouveau le couvercle.

6



CONSEILS D'UTILISATION :

- Votre système de pesée est conçu pour peser des personnes, il ne faut pas s'en servir pour d'autres usages.
- Vérifier que le poids du patient ne dépasse pas le poids maximum que le système de pesée peut peser.
- Il ne faut pas forcer les commandes du système de pesée, ils sont tous faciles à utiliser et n'ont pas besoin de force.
- Il faut manipuler le système de pesée avec précaution quand on transfère un patient et avec une vitesse adaptée à la situation.
- Il ne faut jamais recharger les batteries d'un système de pesée à proximité d'un bain ou d'une douche.
- Une inclinaison de plus de 3° entraînera un poids erroné et un risque certain pour la stabilité du lève personnes mobile.

Mise en Service / Fonctions

Lors de la mise en route, vérifier que l'indicateur affiche toujours 0.0 kg avant l'utilisation.
Si cela n'est pas le cas, merci d'appuyer sur la touche ZERO.
Le PESON RS est programmé pour donner le poids d'un patient stabilisé.

Fonction de la touche : ON / OFF / ZERO / TARE

- Appuyer sur la touche "on/off " pour la mise en route
- Appuyer sur cette touche pour la remise à zéro.
- Appuyer sur cette touche pour tarer.
- Appuyer sur cette touche pour annuler une tare programmée.
- Appuyer en maintenant 3 secondes pour éteindre le peson

1



Fonction de la touche : HOLD

- Appuyer sur la touche **HOLD** pour geler le poids affiché.
- Pour annuler ce poids gelé, appuyer de nouveau sur cette touche.

2




Fonction de la touche : NET

- Indique le poids net (réel) du patient.

Fonction de la touche : HOLD

- Indique que le poids est gelé.

3

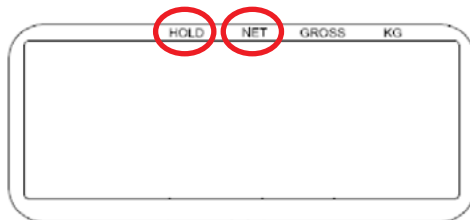

Consignes Générales de Sécurité

1. Utiliser le Système de Pesée conformément à sa destination uniquement, en respectant la législation en vigueur pour les dispositifs médicaux, les prescriptions légales les concernant, la réglementation pour la protection du travail et la prévention des accidents, ainsi que les règles généralement reconnues de la technique.
2. Noter que le Système de Pesée est un dispositif médical, de sorte que son utilisateur est tenu de respecter la directive sur l'utilisation des dispositifs médicaux.
3. Utiliser le Système de Pesée uniquement après avoir été formé pour son maniement et en toute connaissance de cause.
4. Avant la mise en service, lire le mode d'emploi complet afin d'éviter des dommages suite à une mauvaise manipulation ou l'exposition à des risques. Le mode d'emploi contient d'importantes informations et remarques nécessaires pour l'utilisation du Système de Pesée.
5. Utiliser le Système de Pesée conformément au présent mode d'emploi uniquement. Conserver soigneusement le mode d'emploi pour le consulter ultérieurement en cas de questions. Joindre ce mode d'emploi au Système de Pesée en cas de changement de propriétaire.
6. Avant d'employer le Système de Pesée avec d'autres dispositifs médicaux ou non médicaux, vérifier que la combinaison de ces produits est autorisée et qu'ils peuvent être employés ensemble en toute sécurité.
7. La mise en service, l'entretien et la réparation du Système de Pesée doivent être confiés uniquement à des spécialistes compétents.
8. Ne pas exposer le Système de Pesée au rayonnement direct du soleil, ni à la chaleur, ni à l'humidité.
9. Veiller à ce qu'aucune humidité ne pénètre dans le système électrique.
10. Le Système de Pesée ne doit plus être utilisé dès que surviennent des bruits anormaux, des dommages ou tout autre dysfonctionnement. Dans ce cas informer Nausicaa Aks.
11. S'il est endommagé ou défectueux, le Système de Pesée ne doit plus être utilisé. Informer le revendeur pour le charger de remédier au défaut ou à la panne.

Garantie

- Article 1 : AKS France S.A. garantit cet appareil contre tous vices de fabrication et d'assemblage de ses composants mécaniques et électriques et ce uniquement pour des appareils utilisés dans les conditions prévues par AKS France S.A.. Cette garantie, dont les conditions sont définies ci-dessous, est valable 12 mois à compter de la date de premier départ d'AKS France S.A..
- Article 2 : La garantie donne droit à la gratuité de la main d'oeuvre ainsi qu'au remplacement sans frais des pièces reconnues défectueuses.
- Article 3 : Le port Aller de l'appareil, ainsi que tous les frais y afférents, sont à la charge du revendeur. La marchandise voyage toujours aux risques et sous la responsabilité du revendeur.
Sous garantie : les frais de retour après intervention seront à la charge de la société AKS France S.A..
Hors garantie : les frais de retour sont au frais du revendeur qu'il accepte ou non le devis de réparation.
- Article 4 : La garantie ne s'applique pas si les réclamations sont consécutives à :
 - un accident, une mauvaise utilisation de l'appareil ou une négligence de l'acheteur.
 - un transport de l'appareil effectué sans protection adéquate.
 - une modification ou une transformation non validée par la société AKS France S.A..
 - l'incidence d'agents extérieurs (catastrophe naturelle, incendie, chocs, humidité, inondation, foudre, etc...).
 - l'installation et/ou l'utilisation d'une manière non conforme aux normes techniques et de sécurité dans le cas où l'appareil fonctionnerait dans un pays autre que le pays d'achat ; et/ou si l'alimentation électrique n'était pas adaptée à la tension d'utilisation de l'appareil.
 - un défaut d'entretien courant.
- Article 5 : Le revendeur ne pourra invoquer le bénéfice de la garantie :
 - si le numéro de série de l'appareil a été enlevé, modifié ou rendu illisible.
 - si l'appareil sous garantie a été modifié sans l'approbation d'AKS France S.A..
- Article 6 : Durant la réparation du matériel défectueux aucun prêt de matériel ne sera effectué.
- Article 7 : Tout recours en garantie devra être exercé par l'intermédiaire du revendeur. Si cela n'est pas possible, l'acheteur pourra éventuellement adresser son matériel directement à la société AKS France S.A.. Dans ce cas l'acheteur devra indiquer dans un courrier joint au matériel, les coordonnées du revendeur et la copie de la facture d'achat.
- Article 8 : L'envoi de pièces détachées sous garantie ne sera fait qu'après consultation auprès du Service Après Vente d'AKS France S.A..
A noter que les pièces détachées défectueuses devront impérativement être retournées au Service Après Vente d'AKS France S.A. sous peine d'être facturées 1 mois après l'envoi des pièces par AKS France S.A..
- Article 9 : Les pièces défectueuses changées sous ou hors garantie seront, elles, garanties 6 mois à compter de la date de réparation ou de l'envoi de pièces détachées.
- Article 10 : Aucun revendeur ne peut modifier unilatéralement les termes de la présente garantie.

NAUSICAA Médical

NAUSICAA Médical est une marque d'AKS FRANCE S.A.

Service Commercial Siège
Téléphone : 04 66 51 50 80
Fax : 04 66 51 50 47

Mail : contact@nausicaa-medical.com
www.nausicaa-medical.com

NAUSICAA Médical est une marque d'AKS FRANCE S.A.

Votre correspondant :